

N 1500

ELECTROPORACIÓN DE ALTA POTENCIA.

ÚNICO CON ONDAS EXPONENCIALES Y ONDAS DECAMÉTRICAS.



2 AÑOS DE
GARANTÍA
+CAPACITACIÓN

N1500
TECNOLOGÍA DE PUNTA
EQUIPO PROFESIONAL

- BIFÁSICO PULSANTE.
- DE ALTO VOLTAJE Y BAJA INTENSIDAD.
- PANTALLA TOUCH SCREEN.
- DETECTOR DE IMPEDANCIA (ID®)
- EQUIPO FACIAL Y CORPORAL.

- ONDAS EXPONENCIALES
- ONDAS DECAMÉTRICAS
- CONTADOR DE HORAS DE USO.
- MICROELECTRÓNICA SMD.
- GABINETE METÁLICO.

EL EQUIPO MÁS MODERNO DEL MERCADO

En una búsqueda constante de satisfacer las necesidades más exigentes de nuestros clientes, NOTO® desarrolló el N 1500 un equipo que combina tecnología, diseño y la mejor performance en tratamientos de electroporación. El equipo N 1500 incorpora el sistema "ID®" (impedance detector) un desarrollo EXCLUSIVO DE NOTO®.

SISTEMA "ID®" (IMPEDANCE DETECTOR)

Es un sistema inteligente desarrollado por NOTO® que le indica al profesional mediante una señal luminosa que el circuito electrodo-paciente se ha cerrado correctamente y que el equipo está emitiendo la corriente programada en forma correcta. Esto le permite al profesional tener la certeza de que el tratamiento se está realizando en forma segura.

TECNOLOGÍA DE MICROELECTRÓNICA

Su tecnología, al igual que toda la desarrollada por NOTO® está basada en la microelectrónica SMD, tecnología que le confiere al equipo excelentes prestaciones de uso y confiabilidad además de otorgarle mayor seguridad para el paciente y durabilidad por muchos años.

¡BIENVENIDO A LA TECNOLOGÍA! BIENVENIDO A NOTO.

NOTO

LA DIFERENCIA DE SER ÚNICO



Con el lanzamiento de la línea N de NOTO se plantea un rumbo diferente para el mercado de la estética, un nuevo escenario en donde la combinación de terapias, la incorporación de tecnología de punta y la utilización de materiales y productos de primera calidad son fundamentales para la obtención de resultados visibles, efectivos y duraderos.

LA ELECTROPORACIÓN

La electroporación es una alternativa no invasiva a la mesoterapia convencional. Consiste en la aplicación de breves impulsos eléctricos sobre las células y tejidos. Estos impulsos eléctricos especiales actúan en las membranas de las células aumentando la permeabilidad de la membrana permitiendo el paso de sustancias a través de la piel. Esto es hasta 350 veces superior a

una aplicación tópica.

La electroporación permite introducir tanto micro como macromoléculas, inclusive mayores a 800.000 Dalton como el ácido hialurónico o la heparina, o de 500.000 Dalton como el colágeno.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Es un equipo Bifásico.
- No produce dolor ni efectos secundarios.
- Posee un manejo simple y amigable.
- Es atérmico.
- Se deposita el producto sobre la piel, en la zona de aplicación y se pasa el electrodo hasta su perfecta absorción.

APLICACIONES MÁS FRECUENTES:

- P.F.F.E.
- Manchas de piel.
- Arrugas.
- Estrías.
- Flaccidez.
- Envejecimiento cutáneo.
- Etc.

DATOS TÉCNICOS N 1500:

FABRICADO POR:	NOTO GROUP S.A.
PAÍS:	ARGENTINA
NOMBRE DEL PRODUCTO:	N 1500
ANCHO:	185 MM
LONGITUD:	260 MM
ALTURA:	130 MM-75 MM
PESO:	2,1 KG
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	98 A 240 V- 50/60HZ
POTENCIA:	22 VA
FUSIBLE:	F1 AL 250 V
FUNCIONAMIENTO:	MICROCONTROLADOR
PANTALLA :	GRAFICA TÁCTIL DE 128X64
FUENTE:	SWITCHING INTERNA
TECNOLOGÍA:	SMD
CONTROL DE TIEMPO:	POR PROGRAMA


SET DE ELECTROPORACIÓN:

- 1 LÁPIZ ERGONÓMICO DE RESINA ACETAL.
- 1 CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO DE 32 MM PARA EL CUERPO
- 1 CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO DE 15 MM PARA EL ROSTRO.

ELECTROPORACIÓN:

FORMA DE ONDA BIFÁSICA:	PROPIETARIA
FRECUENCIA:	2,1 KHZ
TENSIÓN MÁX:	800 VPP CON CARGA DE 47 K
SISTEMA DE SALIDA:	BIPOLAR
CABEZAL DE ELECTRODO:	ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO
FACIAL:	15 MM
CORPORAL:	32 MM
CUERPO ELECTRODO:	RESINA ACETAL
PLATE:	INYECTADO CON CONEXIONES PIN GRUESO.

Nota: las especificaciones del equipo pueden variar sin previo aviso

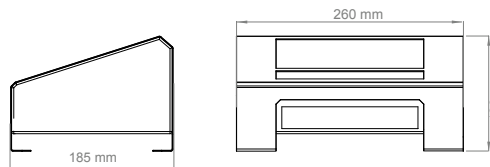

Noto respalda a todos sus clientes con un conjunto de herramientas disponibles en todo momento.

Herramientas que van desde el servicio técnico y de post venta hasta nuestros cursos de tratamientos y apoyo en marketing. Todo esto con el objetivo de lograr que los equipos Noto sean siempre su mejor opción.

OTROS EQUIPOS DE LA LINEA N DE NOTO:

N 1400 - MICRODERMOABRASIÓN.

N 1104 - ELECTROTHERAPIA BIFÁSICA. T.E.N.S.+ ONDAS RUSAS+ONDAS CUADRADAS. 26 P. CORPORALES Y FACIALES.