

DESCONEXIÓN DEL SISTEMA

1. Lavado de manos social.
2. Cerrar la línea de transferencia.
3. Clampear tubuladuras.
4. Lavado de manos largo.
5. Desconexión del circuito de la línea de transferencia.
6. Colocar mini caps.
7. Revisar registro de balance de la cicladora.
8. Registrar en la planilla y cerrar el balance diario.
9. Apagar la cicladora.
10. Descartar los insumos: tubuladuras y bolsa de solución.
11. Pesar al niño.
12. Según el esquema que este indicado por el médico, en este momento se realizará la conexión de un baño manual.

Use la técnica aséptica para reducir el riesgo de infección:

- ✓ Al conectarse al ciclador.
- ✓ Al desconectarse del ciclador.
- ✓ Cada vez que manipule las líneas de fluidos y las bolsas de solución.

SITUACIONES ESPECIALES:

- Desconexión accidental.
- Rotura del circuito o bolsa.
- Apertura accidental.
- Dolor al infundir.
- Cambios en la coloración del líquido.
- Cambios en el orificio de salida.
- Alarmas del sistema.

Ante alguna de las situaciones anteriores mencionadas comuníquese con el equipo de Nefrología Infantil.

IMPORTANTE

El equipo no cuenta con autonomía de batería, ante un corte de energía se suspenderá la terapia.

Consultorio: (0230) – 4482668

o

Cel.: 011 – 15 – 2160 4415

DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA



09/2020

Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA)

Se denomina “Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA)” a todas las técnicas de diálisis peritoneal que utilizan un ciclador para realizar los intercambios.

Los intercambios de la DPA generalmente se denominan “ciclos”. Cada ciclo consta de tres (3) fases:


- Fase de llenado
- Fase de permanencia
- Fase de drenaje

Los parámetros del tratamiento, tales como la cantidad de solución que se va a infundir y el tiempo que la solución permanecerá en la cavidad peritoneal, se programan en el ciclador. Posteriormente, la máquina realiza el tratamiento en forma automática. Los parámetros del tratamiento se modifican y ajustan según la necesidad de cada paciente.


FASES DE LA TERAPIA

Cada ciclo de la terapia consta de tres fases:

1. **DRENAJE:** Durante la fase de drenaje, el sistema extrae el fluido desde su cavidad peritoneal hacia el cassette desechable donde se mide. Luego, el fluido se envía a la opción de drenaje y se descarta.

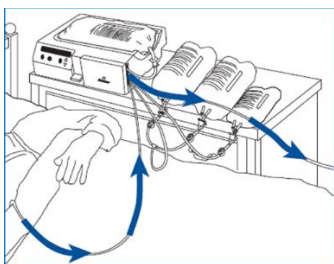

2. **LLENADO:** Durante la fase de llenado, el sistema extrae el fluido de la bolsa térmica hacia el cassette desechable donde se mide. Luego el fluido se transporta a la cavidad peritoneal.

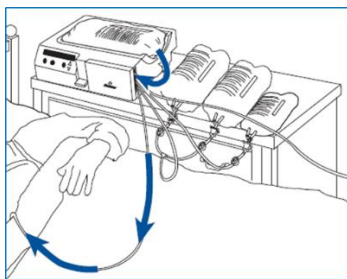


3. **PERMANENCIA:** tiempo que permanece el liquido dentro del peritoneo para realizar el intercambio.

LOS CICLOS PUEDEN VARIAR SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA

Sistema DPA Homechoice

❖ Partes del equipo:

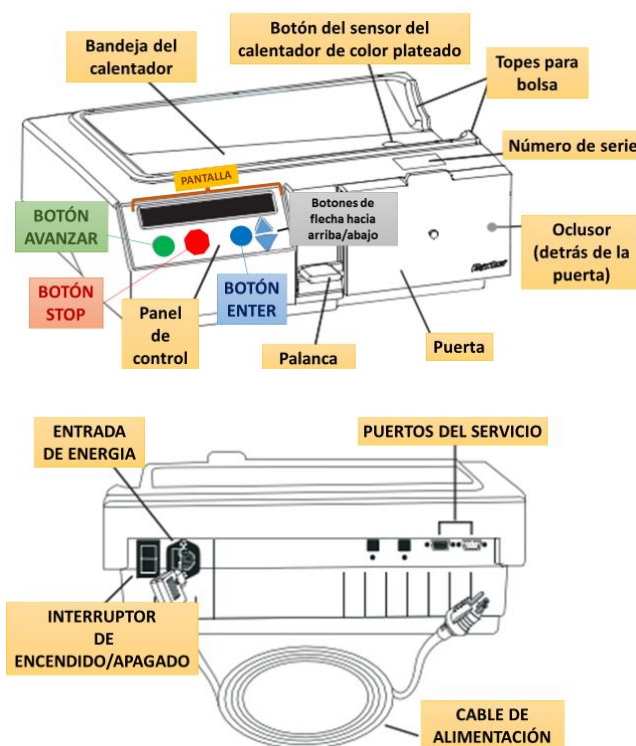

❖ Materiales:


Solución dializadora 1,5 % o 2.5 % 6lts.

Tubuladura cassette.

Mini caps.

Gasa y cinta.

Alcohol al 70% y en gel.

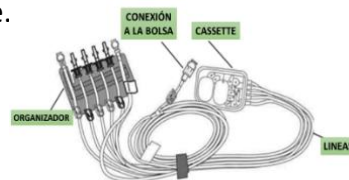

CONEXIÓN PASO POR PASO

1. Preparar el lugar para la conexión.
2. Lavado de manos social.
3. Reunir todos los materiales.
4. Limpiar la superficie y cada uno de los insumos.
5. Enchufar y encender cicladora: aparecerá en la pantalla: "Modo estandar - pulse Go para empezar" (aun no oprima el boton Go).
6. Colocar solución de diálisis a calentar.
7. 1° Lavado de manos largo.
8. Oprimir el boton GO (el sistema va a ir guiandolo).
9. Clampear con pinza la bolsa.
10. Abrir la tubuladura del cassette.
11. Colocar el organizador en la puerta del cassette, cerrar todos los clamps.
12. Retirar el conector de clamp rojo y conectar la espiga a la bolsa de solución de diálisis.
13. Desclampear la bolsa.
14. Presionar ENTER.
15. Abrir los clamp.
16. El equipo empezará a CEBAR el circuito (quitarle el aire a las tubuladuras).
17. 2° Lavado de manos largo.
18. Conecte al paciente.
19. Pulse GO para iniciar comenzará con el drenaje inicial.
20. Luego, continuará con el inicio de los ciclos.

ESTABLECER EL HORARIO DE INICIO DE LA TERAPIA PARA GENERAR LA RUTINA.