

Bellman Visit
Die Lichtsignalanlage von Bellman & Symfon



Reha-Com-Tech

Ihr Online-Shop für Hörgeschädigte



Ein beruhigendes Gefühl für Sie und Ihre Angehörigen

Für Menschen mit einer Hörminderung sind alltägliche Dinge, die andere für selbstverständlich halten, wie zum Beispiel das Hören der Türklingel, eine echte Herausforderung. Aber so muss es nicht sein. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, um Ihr Hören zu verbessern. Bellman & Symfon bietet Produkte an, die Ihnen Ereignisse zu Hause signalisieren und die Ihnen helfen, Gesprächen besser folgen zu können.

Signalisierungssystem

Übersicht	3
Sender	5
Empfänger	7
Vibio & Zubehör	9
Wecker	11
Alarm Clock Modellvergleich	12

Hörhilfen

Übersicht	13
Hörsystem und Hörverstärker	15
Produktvergleich	16
Zubehör	17



Das Visit System Zuhause hören

Das Visit System hilft Menschen mit Hörverlust in ihrem Wohnraum Signale, wie z.B. Türklingel, Telefon oder Rauchmelder wahrzunehmen. Zu wissen, dass Sie benachrichtigt werden, wenn etwas passiert, bietet ein beruhigendes und sicheres Gefühl. Hier sehen Sie, wie die verschiedenen Visit Sender und Empfänger in einem typischen Haushalt arbeiten.

Sender

- 1 **Tür-Sender**
Erkennt, wenn es an der Tür klingelt
Art. Nr. BE1411
- 2 **Telefon-Sender**
Erkennt, wenn das Telefon oder Handy klingelt
Art. Nr. BE1431 + BE9251
- 3 **Rauchmelde-Sender**
Erkennt sowohl Rauch als auch Hitze
Art. Nr. BE1480

Empfänger

- 4 **Alarm Clock mit Vibrationskissen**
Weckt Sie mit Tonsignal, Blitzlicht und Vibration
Art. Nr. BE1580
- 5 **Tischblitzlampe**
Benachrichtigt mit hellem Blitzlicht
Art. Nr. BE1441 / BE1442
- 6 **Pager**
Benachrichtigt mit dezenter Vibration
Art. Nr. BE1470




1. Türklingel-Erkennung



2. Festnetz- und Mobilfunk-Erkennung



3. Rauch- und Brandmeldung

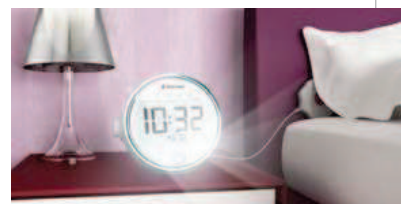

4. Benachrichtigung in der Nacht



5. Benachrichtigung am Tag



6. Benachrichtigung im Freien

Visit Sender

Diskret, wartungsfrei und einfach zu installieren

Telefon-Sender

BE1431 | HMV 16.99.09.0084



* Mobile Phone Sensor (Zubehör) erforderlich

Beschreibung

Der Telefon-Sender hilft Ihnen, das Telefonklingeln zu bemerken. Er signalisiert dies dem Empfänger, der Sie mit Ton, Licht oder Vibration informiert. Sie können eine breite Palette von Zubehör an die drei separaten Trigger-Eingänge anschließen.

Zuverlässig	Bis zu 250 m Reichweite
Flexibel	Erkennt Festnetz- & Handyanrufe*
Multi-Eingang	Drei separate Trigger-Eingänge
Anpassbares Signal	Wählen Sie eines für jeden Trigger
Größe und Gewicht	65 x 100 x 27 mm, 120 g



Tür-Sender

BE1411 | HMV 16.99.09.0082



Beschreibung


Der Türsender informiert Sie, wenn es an der Haustür klingelt. Wenn die Türklingel oder Gegensprechanlage betätigt wird, meldet er dies den Empfängern, welche Sie mit Ton, Licht oder Vibration informieren.

Zuverlässig	Bis zu 250 m Reichweite
Flexibel	Auch für Gegensprechanlagen
Sichere Erkennung	Dual-Mikrofon-Technologie
Programmierbar	Durch „lernen“ jeden Ton erkennen
Größe und Gewicht	65 x 100 x 27 mm, 120 g



Druckknopf-Sender

BE1420 | HMV 16.99.09.0072

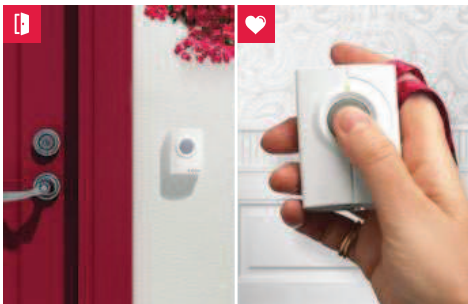

Beschreibung

Der Druckknopf-Sender arbeitet als Funk-Türklingel. Bei Betätigung gibt er ein Signal an den Empfänger, der Sie mit Blitzlicht, Tonsignal und/oder Vibration informiert. Er kann auch als portabler Personenruf-Alarm verwendet werden.

Zuverlässig	Bis zu 200 m Reichweite
Flexibel	Verwendung als Personenruf
Einstellbare Anzeige	Signal Unterscheidung
Lange Leistung	Bis zu 2 J. Batterielebensdauer
Größe und Gewicht	48 x 66 x 23 mm, 50 g



Rauchmelde-Sender

BE1480 | HMV 16.99.09.0079



Beschreibung

Der Rauchmelder warnt Sie sofort im Falle eines Brandes. Er verfügt über Batterieüberwachung, die Sie auf eine schwache Batterie hinweist und ist mit dem Toaster-Modus ausgestattet, um Fehlalarme beim Kochen zu vermeiden.

Opto-thermal	Erkennt Rauch und Hitze
Batterieüberwachung	Automatische Anzeige
Toaster-Modus	In Bereichen mit Küchendünsten
Broadcast-Modus	Warnung an alle Empfänger
Größe und Gewicht	Ø 100 x 30 mm, 110 g



Babyruf-Sender

BE1491 | HMV 16.99.09.0083



Beschreibung

Der Babyruf-Sender informiert Sie, sobald Ihr Kind Sie braucht, auch wenn Sie schlafen oder ein paar Zimmer entfernt sind. Er signalisiert dies dem Empfänger, der Sie mit Ton, Licht oder Vibration alarmiert, sodass Sie immer in der Nähe Ihres Kindes sind.

Zuverlässig	Bis zu 250 m Reichweite
Flexibel	Empfindlichkeit und Verzögerung
Anpassbares Signal	Separates Signal à Kind
Optional Kontaktmatte	Wenn Ihr Kind das Bett verlässt
Größe und Gewicht	65 x 100 x 27 mm, 120 g



CO-Melder

BE1430-EUR-CO



Beschreibung

Der CO-Melder ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über ihr Zuhause haben. Er erkennt gefährliche Kohlenmonoxid-Konzentrationen und leitet den Alarm direkt an Ihren Visit-Empfänger.




Sichere Erkennung	Elektro-chemischer Sensor
Funkverbindung	Bis zu 200 m
Batterieüberwachung	Hinweis auf Wechsel
Selbstdiagnose	Autotests alle 8s
Größe und Gewicht	98 x 85 x 55 mm, 147 g



Erkennung     

Visit Empfänger und Anwendungsset

Smart, funkbasierend und benutzerfreundlich

Ton Blitz Vibration
Signal   

Tischblitzlampe

BE1441/BE1442 | HMV 16.99.09.2027/HMV 16.99.09.2026



Beschreibung

Die Tischblitzlampe informiert Sie durch extra helles Blitzlicht, sobald sie durch einen Sender aktiviert wird. Sie arbeitet kabellos über Funk und lässt sich variabel ausrichten. Es ist auch eine Version mit Ausfall-Akkus (BE1442) verfügbar.

Helles Blitzlicht	30 Candela Xenon Licht
Klare Identifikation	Unterschiedliche Farb-LEDs
Drehbarer Kopf	Einfache Lichtausrichtung
Ausfall-Akkus (BE1442)	Funktioniert bei Stromausfall
Größe und Gewicht	Ø 88 x 155 mm, 320 g



Pager-Empfänger

BE1470 | HMV 16.99.09.4002



Beschreibung

Der Pager benachrichtigt Sie mit Vibration und farbigen LEDs, wenn ein Sender aktiviert wird. Während der Nacht können Sie ein Vibrationskissen an das Ladegerät (Zubehör) anschließen.

Diskrete Vibration	Am Gürtel oder in der Tasche
Klare Identifikation	Individuelle Symbole und Farben
Leicht und mobil	Inkl. Gürtel-Clip und Trageband
Optionales Ladegerät	Anschluss für 2 Vibrationskissen
Größe und Gewicht	57 x 86 x 29 mm, 70 g



Tragbarer-Empfänger

BE1450 | HMV 16.99.09.2015



Beschreibung

Der tragbare Empfänger benachrichtigt Sie mit einem lauten Tonsignal, wenn ein Sender aktiviert wird. Er ist einfach zu bedienen und kabellos, sodass Sie ihn auch auf dem Balkon oder im Garten nutzen können.

Lautes Tonsignal	Einstellbar bis zu 93 dB
Klare Identifikation	Töne und Lichtsignale
Einfache Einrichtung	Wandhalterung inkludiert
Lange Leistung	Bis zu 3 J. Batteriebensdauer
Größe und Gewicht	130 x 165 x 36 mm, 590 g



Armbandempfänger

BE8102 | HMV 16.99.09.1009



Beschreibung

Der Armband-Empfänger benachrichtigt Sie mit Vibration und farbigen LEDs, wenn ein Sender aktiviert wird. Sie tragen ihn einfach wie eine Uhr, die Ladestation ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Diskrete Vibration	Direkt am Handgelenk
Klare Identifikation	Individuelle Symbole und Farben
Inklusive Ladegerät	Anschluss für Vibrationskissen
Flexibel	Beinhaltet Leinen-Armband
Größe und Gewicht	38 x 12 x 49 mm, 27 g



Visit Alarm Clock

BE1580 | HMV 16.99.09.3021



Beschreibung

Der Blitzlichtwecker weckt Sie mit Tonsignal, LED-Blitzlicht und/oder Vibration, wenn es Zeit ist aufzustehen oder ein Sender aktiviert wird. Zusätzlich verfügt er über ein sanftes, blaues Nachtlicht.

Lautes Alarmsignal	Schrittweise auf über 100dB
Intensives Blitzlicht	Vier helle LED Lichter
Vibrationskissen	Weckt Sie mit Vibration
Ausfall-Akkus	Funktioniert bei Stromausfall
Größe und Gewicht	121 x 92 x 108 mm, 390 g



Safe Anwendungsset

BE8037



Beschreibung

Das Safe Set weckt Sie sofort mit Blitzlicht, Vibration und einem Weckton, sobald ein Feuer entstehen sollte - auch wenn Sie mehrere Zimmer vom Rauchmelder entfernt schlafen. Enthält einen Rauchmelder, einen Wecker und ein Vibrationskissen.

Kabellos	Bis zu 200 m Reichweite
Einfache Installation	Beinhaltet alles Benötigte
Ausfall-Akkus	Funktioniert bei Stromausfall
Zuverlässig	Geprüft von Gesundheitsbehörden
Lieferumfang	BE1580, BE1480, BE1272



Zubehör

Erweitern Sie Ihre Visit Lösung

Vibio

BE1220



Beschreibung

Vibio ist ein Vibrationskissen mit Bluetooth-Funktion, es wird mit einer kostenlosen App für iOS oder Android bedient. Es können mehrere Alarme erstellt, die Vibrationsleistung variiert und Hinweise für Anrufe oder SMS gewählt werden.

Deutliche Vibrationen Weckt auch Tiefschläfer

Bluetooth* 4.1 Zuverlässige Verbindung

Benachrichtigungen Anrufe und/oder Nachrichten

Schlummerfunktion Ziehen an der Schlaufe

Speicherfunktion Arbeitet auch ohne Smartphone



Vibrationskissen

BE1270

Beschreibung

Das Vibrationskissen weckt sogar Tiefschläfer. Einfach das Vibrationskissen unter Ihre Matratze oder Ihr Kopfkissen platzieren und mit einem Visit Empfänger oder Ladestation verbinden.

Kraftvolle Vibration Weckt auch Tiefschläfer

Oberfläche Anti-Rutsch-Beschichtung

Sichere Nutzung Niedrig-Spannungsbetrieb

Kabellänge 2 m

Größe und Gewicht 88 x 88 x 27 mm, 120 g



Mobile Phone Sensor

BE9250/BE9251

Beschreibung

Der Mobile Phone Sensor wird aktiviert, wenn ein Mobiltelefon oder der Tablet-Bildschirm aufleuchtet, zum Beispiel bei eingehendem Anruf oder einer Nachricht. Verbinden Sie ihn mit dem Telefon-Sender oder direkt mit der Tischblitzlampe.

Optische Erkennung Über Hintergrundbeleuchtung

Empfindlichkeit Sichtbares Licht >3 Lux

Anschlüsse (BE9250) Sensor: 2,5mm Klinkenstecker
Adapter: 3,5mm Klinkenstecker

Batterie (BE9250) 1 x AAA 1,5 V alkaline
Arbeitszeit > 1 Jahr



Repeater

BE1510

Beschreibung

Der Repeater wird verwendet, um die Reichweite Ihres Visit Systems zu erweitern. Er ist nützlich bei großen Flächen oder in Bereichen mit dicken Wänden und kann auch als Multi-Sender genutzt werden.

Zuverlässig Bis zu 200 m Reichweite

Signalwiederholung Ermöglicht mehrere Repeater

Netzbetrieb Minimale Wartung

Batteriebetrieb Funktioniert bei Stromausfall

Größe und Gewicht 60 x 98 x 30 mm, 110 g



Smart Hub

BE1310

Beschreibung

Der Visit Smart Hub ist eine drahtlose Kommunikationszentrale, die Ihr Zuhause mit Ihren Hörgeräten verbindet. Er hilft Ihnen die Türklingel oder das Telefon zu hören, wenn ein Angehöriger Ihre Hilfe benötigt oder der Rauchalarm ertönt.

Einfach einzurichten Einstecken & verbinden

Bluetooth* Bis zu 30 m Betriebsbereich

Ausfall-Akkus Arbeitet auch bei Stromausfall

Wiederverbindung Mit einem klaren Signal

Größe und Gewicht 100 x 65 x 27 mm, 120 g



Externes Mikrofon

BE9199/BE9200

Beschreibung

Das externe Mikrofon wird mit dem Tür-Sender verwendet. Sie können zum Beispiel hiermit die Gegensprechanlage erkennen lassen, während das interne Mikrofon des Senders die Türklingel erkennt.

Kabellänge 2,5 m / 0,75 m

Mikrofon Piezoelektrisch

Anschlüsse 3,5 mm mono

Gewicht 15 g

Farbe Weiß



Magnetschalter

BE9023

Beschreibung

Wird zusammen mit dem Telefon Sender verwendet und benachrichtigt Sie z.B. wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird. Das Trennen der Magnete wird dem Empfänger signalisiert, der dies mit Ton-, Lichtsignal oder Vibration anzeigt.

Kabellänge 0,5 m

Anschlüsse 3,5 mm mono

Schalter AN < 1 cm vom Magnet

Schalter AUS > 2 cm vom Magnet

Gewicht 25 g



Externes Triggerkabel

BE9086

Beschreibung

Das externe Anschlusskabel wird verwendet, um die Clock Pro BE1370 an die Tischblitzlampe BE1441 anzuschließen. Die Clock weckt Sie dann, sobald einer Ihrer Sender aktiviert wird.

Kabellänge 1,5 m

Alarm Clock Anschluss 3,5 mm stereo

Empfänger Anschluss 3,5 mm mono

Gewicht 20 g

Farbe Weiß



Wandhalterung

BE9075

Beschreibung

Die Wandhalterung wird verwendet, um die Visit Tischblitzlampe oder den Bellman Ringer Flash an die Wand zu montieren, sodass das Blitzlicht überall im Raum gesehen werden kann. Sie beinhaltet Schrauben und Dübel.

Material Aluminium

Nutzung Im Innenbereich

Größe 45 x 90 x 50 mm

Gewicht 110 g

Farbe Weiß



Pager-Ladestation

BE1260

Beschreibung

Das Pager-Ladegerät wird verwendet, um die Akkus Ihres Pagers aufzuladen. Stellen Sie dieses auf Ihren Nachttisch und verbinden Sie es mit einem Vibrationskissen, um während des Schlafs benachrichtigt zu werden, sobald ein Sender aktiviert wird.

Ladezeit ~ 6 Stunden

Ausfall-Batterien Funktioniert bei Stromausfall

Anschlüsse Zwei Vibrationskissen

Kabellänge 1,7 m

Größe und Gewicht 78 x 88 x 43 mm, 385 g



Alarmtrittmatte

BE9026

Beschreibung

Die Alarmtrittmatte von Bellman & Symfon wird zusammen mit dem Telefon-Sender verwendet. Sie werden benachrichtigt, wenn jemand das Zimmer betritt oder verlässt.

Kabellänge 1,5 m

Anschlüsse 3,5 mm mono

Größe 540 x 395 x 4,6 mm

Gewicht 255 g

Farbe Schwarz



Wecker

Vollgepackt mit cleveren Features



Alarm Clock Pro Plus

BE8049



Beschreibung

Weckt Sie mit lauten Tonsignalen, hellem LED-Blitzlicht und Vibrationen vom beiliegenden dem Vibrationskissen. Verbinden Sie den Wecker mit Ihrem Festnetz- oder Mobiltelefon und Sie werden über eingehende Anrufe oder Nachrichten informiert.

Lauter Alarm	Schrittweise auf über 100dB
Helles Blitzlicht	Vier Blitzlicht-LEDs
Vibrationskissen	Weckt Sie mit Vibration
Benachrichtigung	Festnetz- und Mobiltelefon/Tablet
Lieferumfang	BE1370, BE1272, BE9250



Alarm Clock Pro

BE1370 | HMV 16.99.09.3022



Beschreibung

Der Wecker Pro weckt Sie mit extra lauten Wecktönen, hellem LED-Blitzlicht und Vibrationen des beiliegenden Vibrationskissens. Er ist einfach zu bedienen und vollgepackt mit cleveren Features wie Nachtlicht und Ausfall-Akkus.

Lautes Alarmsignal	Schrittweise auf über 100dB
Helles Blitzlicht	Vier Blitzlicht-LEDs
Vibrationskissen	Weckt Sie mit Vibration
Ausfall-Akkus	Funktioniert bei Stromausfall
Größe und Gewicht	121 x 92 x 108 mm, 390 g



Alarm Clock Classic

BE1350 | HMV 16.99.09.3023



Beschreibung

Der Wecker Classic weckt Sie mit einem extra lauten Weckton und Vibrationen des beiliegenden Vibrationskissens. Er ist sehr einfach zu bedienen, hat ein beleuchtetes LCD-Display und große Einstelltasten.

Lautes Alarmsignal	Schrittweise auf über 100dB
Vibrationskissen	Weckt Sie mit Vibration
Einfache Bedienung	Große Drehknöpfe
Größe und Gewicht	121 x 92 x 108 mm, 390 g



Alarm Clock Übersicht

Welcher Wecker passt zu Ihnen?

Eigenschaften

Visit

Pro

Classic



HMV: 16.99.09.3021
BE1580
Der ultimative Wecker mit Visit Funktion



HMV: 16.99.09.3022
BE1370
Unser leistungsstärkster unabhängiger Wecker



HMV: 16.99.09.3023
BE1350
Der Wecker für Preisbewusste

LCD mit Beleuchtung	✓	✓	✓
Weckwiederholung	✓	✓	✓
100+dB Alarmton	✓	✓	✓
Ausfallakku-Funktion	✓	✓	✓
Akkus im Lieferumfang	✓	✓	—
Vibrationskissen mit Ton	✓	✓	—
Vibrationskissen ohne Ton	—	—	✓
4 LED-Blitzlichter	✓	✓	—
Nachtlicht	✓	✓	—
LED Alarm Anzeige	✓	✓	—
Telefonsteckeranschluss	✓	✓	—
Ext. Triggeranschluss Visit	✓	✓	—
Empfänger	✓	—	—
Lieferumfang	Visit Wecker Vibrationskissen mit Ton Netzkabel Bedienungsanleitung Ausfall-Akkus	Pro Wecker Vibrationskissen mit Ton Netzkabel Bedienungsanleitung Ausfall-Akkus	Classic Wecker Vibrationskissen ohne Ton Netzkabel Bedienungsanleitung

Reha-Com-Tech - Ihr Online-Shop für Hörgeschädigte

Seit 1992 sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um den optimalen Einsatz ergänzender Hörlösungen und Kommunikationshilfen für schwerhörige, gehörlose und ertaubte Menschen.

Bei der Auswahl unserer Produkte haben wir in vielen Jahren das Prinzip der Qualität und der Funktionalität in den Dienst unserer Kunden gestellt.



Haben Sie Fragen zur Kostenübernahme Ihrer Bellman Visit Lichtsignalanlage durch Ihre Krankenkasse (GKV)?
Kontaktieren Sie uns! Wir berasten Sie gerne!

Reha-Com-Tech
Schönbornstraße 1
54295 Trier

Telefon: 0651 99 45 680 Fax: 0651 99 45 681
Mail: info@reha-com-tech.de
www.reha-com-tech.de

