

Los pesarios son la opción preferida para las mujeres que prefieren evitar la cirugía o tienen contraindicaciones médicas.

Pesarios ...

La solución no invasiva perfecta para evaluar o resolver el prolapso de órganos pélvicos, la incontinencia de esfuerzo, la incontinencia de urgencia y la nicturia asociada con la retención urinaria.

El pesario es un dispositivo seguro y eficaz que se utiliza para tratar una serie de problemas ginecológicos, incluidos los defectos del soporte pélvico, la incontinencia urinaria de esfuerzo y la retención urinaria.

El pesario fue diseñado para reposicionar los órganos apropiados como terapia de primera línea para todas las mujeres con prolapso y / o controlar el momento del flujo de orina, recuperando así su calidad de vida.

Los pesarios de silicona Milex® líderes en el mercado vienen en una amplia variedad de configuraciones para ofrecer un ajuste óptimo a las necesidades de sus pacientes.

Como herramienta no quirúrgica para manejar situaciones de prolapso e incontinencia, los pesarios de Milex no tienen igual. El dispositivo es económico y fácil de administrar. También brinda la oportunidad de evaluar qué abordaje quirúrgico, si lo hay, mejorará la condición del paciente antes de ir a una solución quirúrgica.

Los médicos pueden usar pesarios para evaluar el efecto de la reducción del prolapso sobre los síntomas y ayudar a determinar las opciones quirúrgicas.


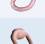
Proceso de ajuste del pesario

El ajuste adecuado del pesario puede requerir que el paciente pruebe varias formas y tamaños de pesarios. Una vez que se ha realizado un examen pélvico completo, el médico debe comenzar con una forma y tamaño basados en la experiencia del médico. Una vez que se determina la forma correcta, el pesario más grande que el paciente puede llevar cómodamente suele ser el más eficaz. Después de un ajuste cómodo, el paciente debe poder ponerse en cuclillas, sentarse o pararse sin que se le coloque el pesario.

El dedo del médico debe pasar fácilmente entre el pesario y la pared vaginal. El médico debe revisar el pesario para asegurarse de que se cumpla con la función deseada. Cuando la indicación del pesario es la incontinencia urinaria de esfuerzo, se le debe pedir al paciente que tosa para detectar cualquier pérdida de orina, con el pesario afuera y nuevamente con él adentro.



Tabla de selección de pesario *

Código de Producto	Criterios de condición y selección	Procedentia					Incontinencia por estrés	Desplazamiento Retro	Cuello uterino incompetente	Tamaños más comunes	Material	Facilidad de inserción / extracción	Compatible con la actividad sexual
		Prolapso			Cistocèle	Rectocèle							
		1 - 2°	3 - 4°	Pared vaginal									
MXPER	 Anillo	X							2½ - 3¼"	Silicona & Metal	Fácil	X	
MXPERK	 Anillo con Tirador	X			X	X			2¼ - 3½"	Silicona & Metal	Fácil	X	
MXPRS	 Anillo con Soporte	X			X				2½ - 3¼"	Silicona & Metal	Fácil	X	
MXPRSK	 Anillo con Soporte y Tirador	X			X	X			2¼ - 3½"	Silicona & Metal	Fácil	X	
MXPCON	 Anillo de Incontinencia					X			2¼ - 3½"	Silicona & Metal	Fácil	X	
MXPSH	 Shaatz	X							2¼ - 3"	Silicona	Medio	X	
MXPDO	 Dona		X		X	X			2½ - 3¼"	Silicona	Medio/Difícil		
MXPREG	 Regula	X		X	X	X			1¼ - 1½"	Silicona & Metal	Fácil/Medio		
MXPGE	 Gellhorn Flexible		X						2¼ - 3"	Silicona	Difícil		
MXPEH	 Hodge	X					X	X	3½ - 4½" x 2¼ - 2⅝"	Silicona & Metal	Fácil/Medio	X	
MXPHS	 Hodge con Soporte	X			X	X			2½ - 3⅝"	Silicona & Metal	Fácil/Medio	X	
MXPEHK	 Hodge con Tirador	X				X	X		3¼ - 3¾" x 1⅕ - 2¼"	Silicona & Metal	Fácil/Medio	X	
MXPHSK	 Hodge con Tirador y Soporte	X			X	X	X		3¼ - 3¾" x 1⅕ - 2¼"	Silicona & Metal	Fácil/Medio	X	
MXPRI	 Risser	X					X	X	3½ - 4½" x 2¼ - 2⅝"	Silicona & Metal	Fácil/Medio	X	
MXPES	 Smith	X					X	X	3½ - 4½" x 2¼ - 2⅝"	Silicona & Metal	Fácil/Medio	X	
MXPCOND	 Plato de Incontinencia	X				X			2½ - 3⅝"	Silicona	Fácil/Medio	X	
MXPCONDS	 Plato de Incontinencia con Soporte	X			X	X			2½ - 3⅝"	Silicona	Fácil/Medio	X	
MXPEC	 Cubo		X	X	X	X			1⅝ - 1¾"	Silicona	Medio	X	
MXPECT	 Cubo Tandem		X	X	X	X			1⅝ - 1¾"	Silicona	Medio	X	
MXPGS	 Gehung		X		X	X			1⅝ - 1¾" x 2 - 2⅜"	Silicona & Metal	Medio/Difícil	X	
MXPGSK	 Gehung con Tirador		X		X	X	X		1⅝ - 1¾" x 2 - 2⅜"	Silicona & Metal	Medio/Difícil	X	
MXPINF	 Inflataball		X		X	X			2¼ - 2½"	Latex	Fácil	X	



* Fuente: Viera AJ, Larkins-Pettigrew M. Uso práctico del pesario. Soy Fam Physician. 1 de mayo de 2000; 61 (9): 2719-26

Ofertas de productos de pesario de la marca MILEX®

P = Prolapso
I = Incontinencia

Anillo



Para prolapso leve.
Producto # MXPER

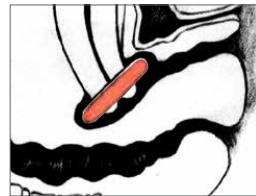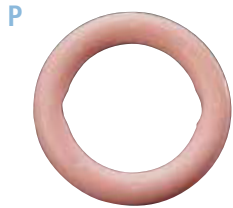

Anillo		
Producto #	in.	mm
MXPER00	1¾	44
MXPER01	2	51
MXPER02	2¼	57
MXPER03	2½	64
MXPER04	2¾	70
MXPER05	3	76
MXPER06	3¼	83
MXPER07	3½	89
MXPER08	3¾	95
MXPER09	4	102
MXPER10	4¼	108
MXPER11	4½	114
MXPER12	4¾	121
MXPER13	5	127

Anillo con tirador



Para prolapso leve complicado por incontinencia urinaria de esfuerzo.
Producto # MXPERK

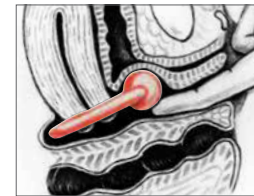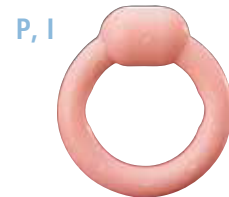

Anillo con tirador		
Producto #	in.	mm
MXPERK00	1¾	44
MXPERK01	2	51
MXPERK02	2¼	57
MXPERK03	2½	64
MXPERK04	2¾	70
MXPERK05	3	76
MXPERK06	3¼	83
MXPERK07	3½	89
MXPERK08	3¾	95
MXPERK09	4	102
MXPERK10	4¼	108
MXPERK11	4½	114
MXPERK12	4¾	121
MXPERK13	5	127

Anillo con Soporte

Para prolapso leve complicado por un cistocele leve.
Producto # MXPRS

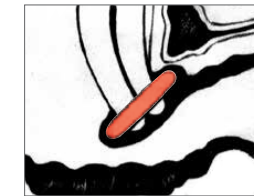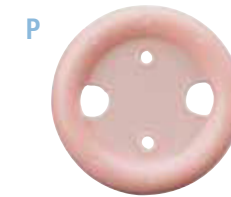

Anillo con soporte		
Producto #	in.	mm
MXPRS00	1¾	44
MXPRS01	2	51
MXPRS02	2¼	57
MXPRS03	2½	64
MXPRS04	2¾	70
MXPRS05	3	76
MXPRS06	3¼	83
MXPRS07	3½	89
MXPRS08	3¾	95
MXPRS09	4	102
MXPRS10	4¼	108
MXPRS11	4½	114
MXPRS12	4¾	121
MXPRS13	5	127

Anillo de Incontinencia



Para la incontinencia urinaria de esfuerzo.
Producto # MXPCON



Anillo de Incontinencia		
Producto #	in.	mm
MXPCON00	1¾	44
MXPCON01	2	51
MXPCON02	2¼	57
MXPCON03	2½	64
MXPCON04	2¾	70
MXPCON05	3	76
MXPCON06	3¼	83
MXPCON07	3½	89
MXPCON08	3¾	95
MXPCON09	4	102
MXPCON10	4¼	108
MXPCON11	4½	114
MXPCON12	4¾	121
MXPCON13	5	127

Anillo con Soporte y tirador



Para prolapso leve complicado por un cistocele leve e incontinencia urinaria de esfuerzo.
Producto # MXPRSK

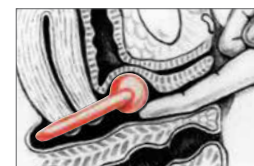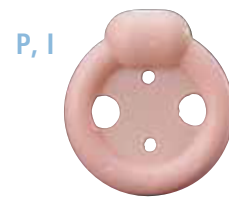

Anillo de Incontinencia con soporte y tirador		
Producto #	in.	mm
MXPRSK00	1¾	44
MXPRSK01	2	51
MXPRSK02	2¼	57
MXPRSK03	2½	64
MXPRSK04	2¾	70
MXPRSK05	3	76
MXPRSK06	3¼	83
MXPRSK07	3½	89
MXPRSK08	3¾	95
MXPRSK09	4	102
MXPRSK10	4¼	108
MXPRSK11	4½	114
MXPRSK12	4¾	121
MXPRSK13	5	127

Shaatz

Para prolapso leve complicado por un cistocele leve.
Producto # MXPSH

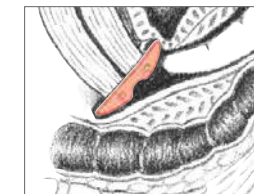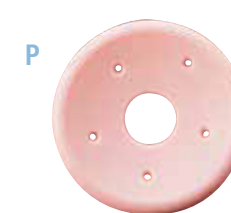


Shaatz		
Producto #	in.	mm
MXPSH-1½	1½	38
MXPSH-1¾	1¾	44
MXPSH-2	2	51
MXPSH-2¼	2¼	57
MXPSH-2½	2½	64
MXPSH-2¾	2¾	70
MXPSH-3	3	76
MXPSH-3¼	3¼	83
MXPSH-3½	3½	89
MXPSH-3¾	3¾	95

Hodge

Para la incontinencia urinaria de esfuerzo en una mujer que tiene un introito vaginal muy pequeño.

Producto # MXPEH

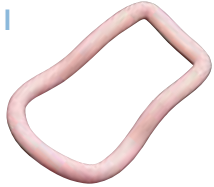

Hodge con soporte

Para la incontinencia urinaria de esfuerzo con un cistocele leve en una mujer que tiene un introito vaginal muy pequeño.


Producto # MXPHS



Hodge con tirador

Para la incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer que tiene un pequeño introito vaginal.



Producto # MXPEHK

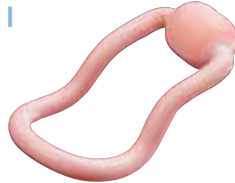

Hodge con soporte y tirador

Para la incontinencia urinaria de esfuerzo complicada por un cistocele leve en la mujer que tiene un pequeño introito vaginal.

Producto # MXPHSK

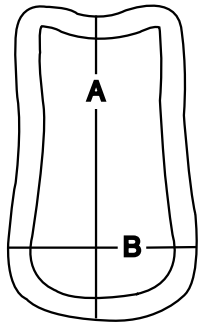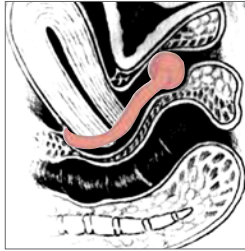

Hodge							
Hodge	Con soporte	Con tirador	Con soporte y tirador				
Producto #	Producto #	Producto #	Producto #	in. (A)	mm (A)	in. (B)	mm (B)
MXPEH00	MXPHS00	MXPEHK00	MXPHSK00	2¾	70	1¾	44
MXPEH01	MXPHS01	MXPEHK01	MXPHSK01	3	76	1¾	48
MXPEH02	MXPHS02	MXPEHK02	MXPHSK02	3¼	83	1 ¹⁵ / ₁₆	49
MXPEH03	MXPHS03	MXPEHK03	MXPHSK03	3½	89	2	51
MXPEH04	MXPHS04	MXPEHK04	MXPHSK04	3¾	92	2¼	54
MXPEH05	MXPHS05	MXPEHK05	MXPHSK05	3¾	95	2¼	57
MXPEH06	MXPHS06	MXPEHK06	MXPHSK06	3¾	98	2¾	60
MXPEH07	MXPHS07	MXPEHK07	MXPHSK07	4¼	108	2½	64
MXPEH08	MXPHS08	MXPEHK08	MXPHSK08	4¾	117	2¾	67
MXPEH09	MXPHS09	MXPEHK09	MXPHSK09	5	127	2¾	70

Gellhorn


Para prolapso / procidentia de tercer grado.

Producto # MXPGE

También disponible en:

Producto de tallo corto # MXPGRS

Producto rígido # MXPGRS

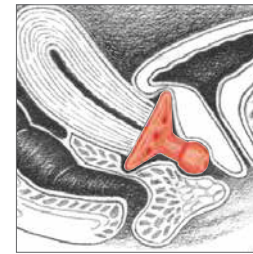



Gellhorn				
Flexible	Rígido	Tallo corto		
Producto #	Producto #	Producto #	in.	mm
MXPGE-1½	MXPGRS-1½	MXPGSS-1½	1½	38
MXPGE-1¾	MXPGRS-1¾	MXPGSS-1¾	1¾	44
MXPGE-2	MXPGRS-2	MXPGSS-2	2	51
MXPGE-2¼	MXPGRS-2¼	MXPGSS-2¼	2¼	57
MXPGE-2½	MXPGRS-2½	MXPGSS-2½	2½	64
MXPGE-2¾	MXPGRS-2¾	MXPGSS-2¾	2¾	70
MXPGE-3	MXPGRS-3	MXPGSS-3	3	76
MXPGE-3¼	MXPGRS-3¼	MXPGSS-3¼	3¼	83
MXPGE-3½	MXPGRS-3½	MXPGSS-3½	3½	89
MXPGE-3¾	MXPGRS-3¾	MXPGSS-3¾	3¾	95




Regula

Para el prolapso uterino (1° y 2° grado).

Producto # MXPREG

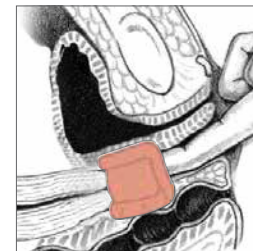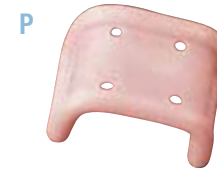

Regula Plegable						
Producto #	in. (A)	mm (A)	in. (B)	mm (B)	in. (C)	mm (C)
MXPREG00	1	25	1 ¹⁵ / ₁₆	49	1¾	35
MXPREG01	1 ¹ / ₁₆	27	2	51	1½	38
MXPREG02	1¾	29	2¼	54	1¾	41
MXPREG03	1¼	32	2 ³ / ₁₆	56	1¾	44
MXPREG04	1¾	35	2¼	57	1¾	48
MXPREG05	1 ⁷ / ₁₆	37	2¾	60	2	51
MXPREG06	1½	38	2¾	67	2¼	54
MXPREG07	1¾	41	2¾	73	2¼	57
MXPREG08	1¾	44	3¾	79	2¾	60

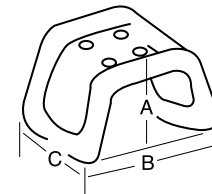

Cubo

Soporte para prolapso /
procidencia de tercer grado.


Debe eliminarse todas las noches.

Producto # MXPEC

También disponible en:

Cubo con orificios de drenaje

Producto # MXPECH

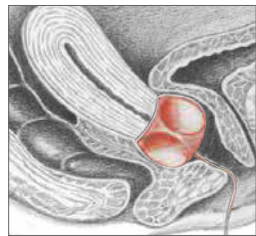



Cubo Tandem

Soporte para prolapso / procidencia
de tercer grado cuando un solo cubo

proporciona un soporte inadecuado.

Debe eliminarse todas las noches.

Producto # MXPECT

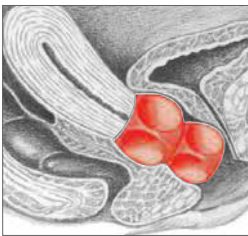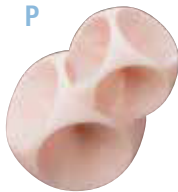


Cubo			
Cubo	Con orificios		
Producto #	Producto #	in.	mm
MXPEC00	MXPECH00	1	25
MXPEC01	MXPECH01	1 ¹ / ₆	30
MXPEC02	MXPECH02	1 ¹ / ₆	35
MXPEC03	MXPECH03	1 ¹ / ₂	38
MXPEC04	MXPECH04	1 ¹ / ₆	41
MXPEC05	MXPECH05	1 ³ / ₄	44
MXPEC06	MXPECH06	2	51
MXPEC07	MXPECH07	2 ¹ / ₄	57

Cubo Tandem		
Producto #	in.	mm
MXPECT2-0	1 ¹ / ₆ & 1	35 & 25
MXPECT3-1	1 ¹ / ₂ & 1 ¹ / ₆	38 & 30
MXPECT4-2	1 ¹ / ₆ & 1 ¹ / ₆	41 & 35
MXPECT5-3	1 ³ / ₄ & 1 ¹ / ₂	44 & 38
MXPECT6-4	2 & 1 ¹ / ₆	51 & 41
MXPECT7-5	2 ¹ / ₄ & 1 ³ / ₄	57 & 44

Plato de incontinencia

Para la incontinencia urinaria
de esfuerzo con prolapso leve.


Producto # MXPCOND

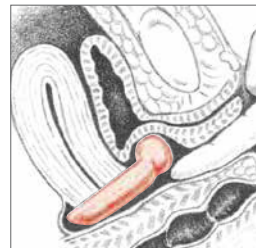

Plato de incontinencia con soporte

Para la incontinencia urinaria
de esfuerzo con prolapso leve
y cistocele.


Producto # MXPCONDS

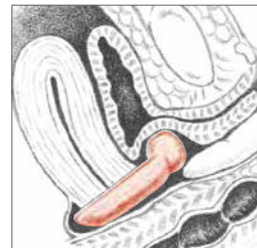


Risser

Diseñado para pacientes con muesca púbica
poco profunda. Tiene una zona de soporte
de peso más grande para soportar los
aspectos vaginales del pubis. Útil en casos
de abortos espontáneos repetidos debido a
un cuello uterino incompetente al
reposicionar el peso del feto en crecimiento.

Producto # MXPRI

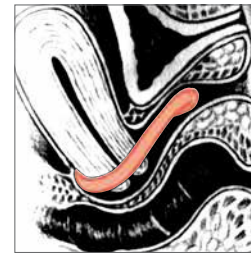

Risser				
Producto #	in. (A)	mm (A)	in. (B)	mm (B)
MXPRI00	3 ¹ / ₈	79	2	51
MXPRI01	3 ¹ / ₄	83	2 ¹ / ₈	54
MXPRI02	3 ¹ / ₂	89	2 ¹ / ₄	57
MXPRI03	3 ³ / ₄	95	2 ³ / ₈	60
MXPRI04	4 ¹ / ₄	108	2 ¹ / ₂	64
MXPRI05	4 ¹ / ₂	114	2 ³ / ₈	67
MXPRI06	4 ³ / ₄	121	2 ³ / ₄	70
MXPRI07	5	127	2 ¹ / ₈	73
MXPRI08	5 ¹ / ₂	140	3	76
MXPRI09	5 ³ / ₄	146	3 ¹ / ₈	79

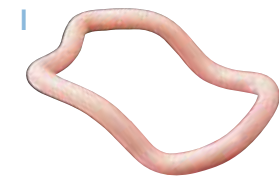


Smith

Modificación del pesario de Hodge.

Para la incontinencia urinaria de
esfuerzo diseñado para pacientes con
una muesca púbica bien definida. Útil
en casos de abortos espontáneos
repetidos debido a un cuello uterino
incompetente al reposicionar el peso
del feto en crecimiento.

Producto # MXPES

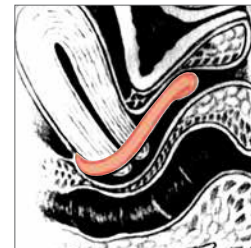

Smith				
Producto #	in. (A)	mm (A)	in. (B)	mm (B)
MXPES00	3 ¹ / ₈	79	2	51
MXPES01	3 ¹ / ₄	83	2 ¹ / ₈	54
MXPES02	3 ¹ / ₂	89	2 ¹ / ₄	57
MXPES03	3 ³ / ₄	95	2 ³ / ₈	60
MXPES04	4 ¹ / ₄	108	2 ¹ / ₂	64
MXPES05	4 ¹ / ₂	114	2 ³ / ₈	67
MXPES06	4 ³ / ₄	121	2 ³ / ₄	70
MXPES07	5	127	2 ¹ / ₈	73
MXPES08	5 ¹ / ₂	140	3	76
MXPES09	5 ³ / ₄	146	3 ¹ / ₈	79



Gehung Plegable con Tirador

Para cistocele con o sin rectocele leve complicado por incontinencia urinaria de esfuerzo.





Producto # MXPGSK




Gehung/Plegable

Soporte para cistocele y rectocele. También es más adaptable en casos de procidentia donde el útero tiende a herniarse cuando se usan otros pesarios.

Producto # MXPGS

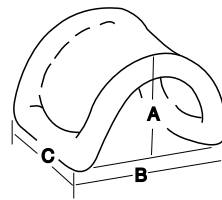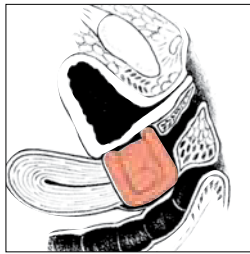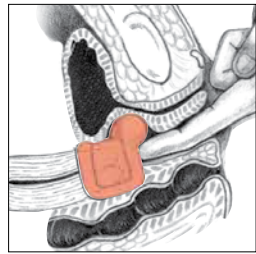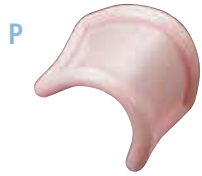



Gehung							
Gehung Plegable con tirador	Gehung Plegable						
Producto #	Producto #	in. (A)	mm (A)	in. (B)	mm (B)	in. (C)	mm (C)
MXPGSK00	MXPGS00	1 1/16	27	1 1/2	38	1 3/8	35
MXPGSK01	MXPGS01	1 1/8	29	1 3/4	44	1 1/2	38
MXPGSK02	MXPGS02	1 3/8	35	2	51	1 5/8	41
MXPGSK03	MXPGS03	1 1/2	38	2 1/8	54	1 3/4	44
MXPGSK04	MXPGS04	1 5/8	41	2 1/4	57	1 7/8	48
MXPGSK05	MXPGS05	1 3/4	44	2 3/8	60	2	51
MXPGSK06	MXPGS06	1 7/8	48	2 1/2	64	2 1/8	54
MXPGSK07	MXPGS07	2	51	2 5/8	73	2 1/4	57
MXPGSK08	MXPGS08	2 1/8	54	3	76	2 3/8	60
MXPGSK09	MXPGS09	2 1/4	57	3 1/8	79	2 3/4	64

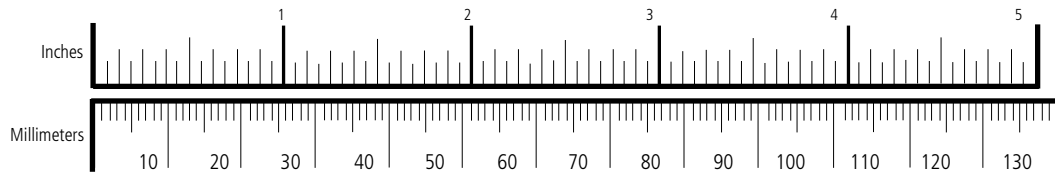

Dona

Soporte para prolapso / procidentia de tercer grado. No desinflar durante la inserción o extracción. Consulte Inflatoball si es necesario un pesario desinflable.

Producto # MXPDO

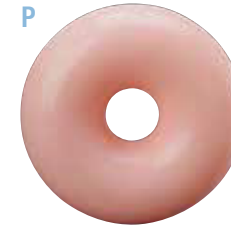
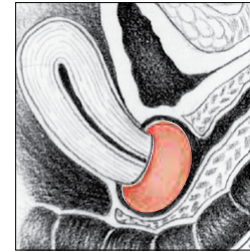


Dona		
Producto #	in.	mm
MXPDO00	2	51
MXPDO01	2 1/4	57
MXPDO02	2 1/2	64
MXPDO03	2 3/4	70
MXPDO04	3	76
MXPDO05	3 1/4	83
MXPDO06	3 1/2	89
MXPDO07	3 3/4	95

Inflatoball™

Inflable para prolapso / procidentia de tercer grado con o sin un cistocele leve y / o rectocele.

Producto # MXPINF

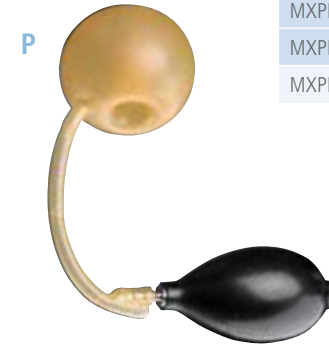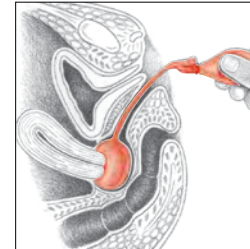

Tamaño de Inflatoball		
Producto #	in.	mm
MXPINF5	2	51
MXPINFM	2 1/4	57
MXPINF L	2 1/2	64
MXPINF XL	2 3/4	70

Nota: Las áreas sombreadas muestran el surtido mínimo necesario para adaptarse a aproximadamente el 85% de los pacientes.



CooperSurgical is the leading company dedicated to providing medical devices and procedure solutions that improve health care delivery to women regardless of clinical setting. Our company is fostering that position through expansion of its core businesses and introduction of advanced technology-based products which aid clinicians in the management and treatment of commonly seen conditions.

203.601.5200 | 800.243.2974 | coopersurgical.com | 95 Corporate Dr. | Trumbull, CT 06611

©2016 CooperSurgical, Inc

81983 Rev B 12/16